

Панель зонного крану



Панель для кранів з висувним вікном



Панель для кранів з алюмінієвими дверцятами



Технічна Специфікація

- Панель зонного крана серії Silbermann.
- Кожен прихований/відкритий зонний кран складається зі сталевих панелі для кранів, виготовленої зі сталевих листів товщиною 1,5 мм, з покриттям емаллю RAL 9016, в якій можна розмістити один або декілька запірних кульових кранів з патрубками.
- Кран має 3-сходову ковану латунну конструкцію з 4 болтами, бронзовий або латунний корпус, шток, кульові болти та гайки виготовлені з нержавіючої сталі, подвійне ущільнення, кульовий тип з повним портовим з'єднанням, з тефлоновим (RPTFE) сідлом та ущільненнями з вітону, з номінальним тиском 4080 кПа (600 фунтів на кв. дюйм),
- Крани управляються за допомогою рукоятки важільного типу, що вимагає лише чверть обороту від повністю відкритого до повністю закритого положення. Всі крани оснащені промитими і знежиреними мідними патрубками типу "К" достатньої довжини, щоб вони виступали за межі бокових стінок коробки.
- Усі патрубки мають відповідні заглушки або ковпачки, щоб запобігти забрудненню конструкції перед установкою.
- Кожен кран забезпечений ідентифікаційною етикеткою медичного газу.
- Крани поставляються з манометрами або без них, залежно від потреби. Манометри мають діаметр 50 мм.
- Манометри показують 0-1100 кПа (0-11 бар) для всіх манометрів, крім азоту, який показує 0-2500 кПа (0-25 бар), і вакууму, який показує 0-100 кПа (0-760 мм рт. ст.).
- Є два варіанти передньої панелі: алюмінієві дверцята або висувне знімне вікно.



Технічна Специфікація - Панель для кранів з висувним вікном

- Доступ до зональних запірних кранів здійснюється шляхом витягування кільцевого вузла для виймання вікна з дверної коробки. Встановити вікно на місце без використання інструментів можна лише після того, як ручки кранів будуть повернуті у відкрите положення.
- Вікно повинно бути позначене наступним написом, нанесеним шовкографічним способом: "ОБЕРЕЖНО: КРАНИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ГАЗОМ. ЗАКРИВАТИ ТІЛЬКИ В ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКАХ"
- Передня частина рами повинна бути виготовлена з анодованого алюмінію і кріпитися до задньої частини корпусу за допомогою гвинтів, як передбачено. Знімна передня частина складається з прозорого вікна з полікарбонату з попередньо встановленим по центру вікна висувним кільцем.



Технічна Специфікація- Панель для кранів з алюмінієвими дверцятами

- Доступ до зонних запірних кранів здійснюється шляхом відмикання ключа та/або повороту ручки на алюмінієвих дверцятах. Дверцята можна закрити тільки після того, як ручки кранів будуть повернуті у відкрите положення.
- На дверях має бути напис: "ОБЕРЕЖНО: КРАНИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ГАЗОМ. ЗАКРИВАТИ ТІЛЬКИ В ЕКСТРЕНИХ ВИПАДКАХ"
- Передня частина рами повинна бути виготовлена з анодованого алюмінію і кріпитися до задньої частини корпусу за допомогою гвинтів, як передбачено. Фасад панелі повинен складатися з металевих передніх дверей з ключем, що замикається, та небиткого вікна для огляду манометрів.

Стандарти медичних газових систем:

- NFPA99, EN ISO 7396-1 & G-01 вимоги.

Система управління якістю Silberman:

- EN ISO 13485-2016; ISO 9001-2015.
- CE марковано нотифікованим органом TÜV-SÜD.




Панель зонного крану

Трубопровід
для медичних газів



Розміри [мм]

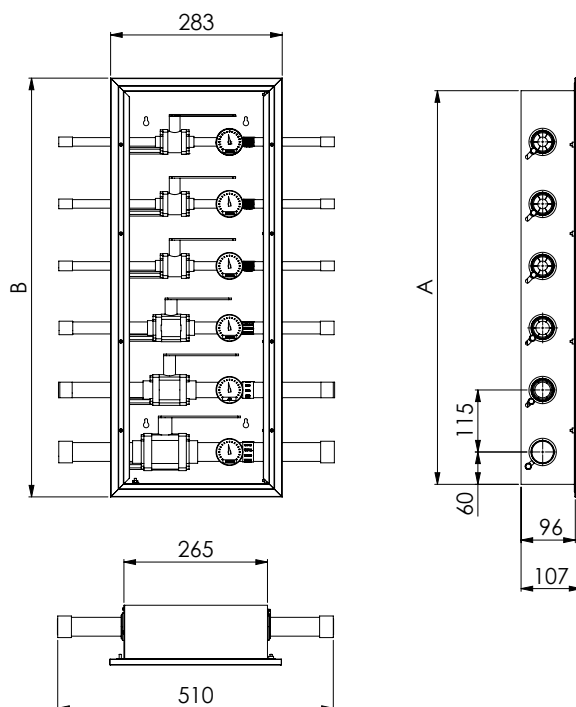

Кількість кранів	Розмір кранів	Розміри панелі для кранів (мм)	
		A	B
1-2	1/2" - 1 1/2"	290	308
3-4	1/2" - 1 1/2"	520	538
5-6	1/2" - 1 1/2"	750	768

* Якщо потрібен клапан 2", будь ласка, повідомте про це нам.

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950

Ver 01-2019