

Розетка Air Motor для хірургічного пневмоінструменту

Розетка Air Motor для хірургічного пневмоінструменту подачі та відведення.

Вона використовується для подачі повітря або N2 для приведення в дію хірургічних інструментів в операційних. Відпрацьований газ від інструментів відводиться через розетку за межі приміщення, щоб уникнути турбулентних потоків в операційній.

Розетку Air Motor для хірургічного пневмоінструменту розроблено відповідно до найсуворіших європейських вимог ISO 7396-1, а також відповідно до американського стандарту NFPA99.



Розетка Air Motor та штуцер



Підвісний монтаж



Штекер



Особливості та переваги

- Безпечне та надійне з'єднання між медичними/хірургічними інструментами та медичною газорозподільною системою.
- Всі розетки проходять 100% гідростатичні випробування на герметичність
- Розетки збираються на заводі.
- Можна використовувати з повітрям або N2
- Стандарти медичних газових систем: NFPA99, EN ISO 7396-1.
- Стандарти, що застосовуються: EN ISO 9170-1, DIN 13260-2, ENV 737-6



Технічні характеристики

- Розетка Air Motor.
- Робочий тиск: від 7 до 11 бар.
- Потік повітря: до 500 л/хв при 8 бар.
- Відпрацьоване повітря: До 500 л/хв при 0, 2 бар (макс.).

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015


CE 0123




Розетка Air Motor для хірургічного пневмоінструменту

Трубопровід
для медичних газів


Розетка Air Motor Схематичне креслення

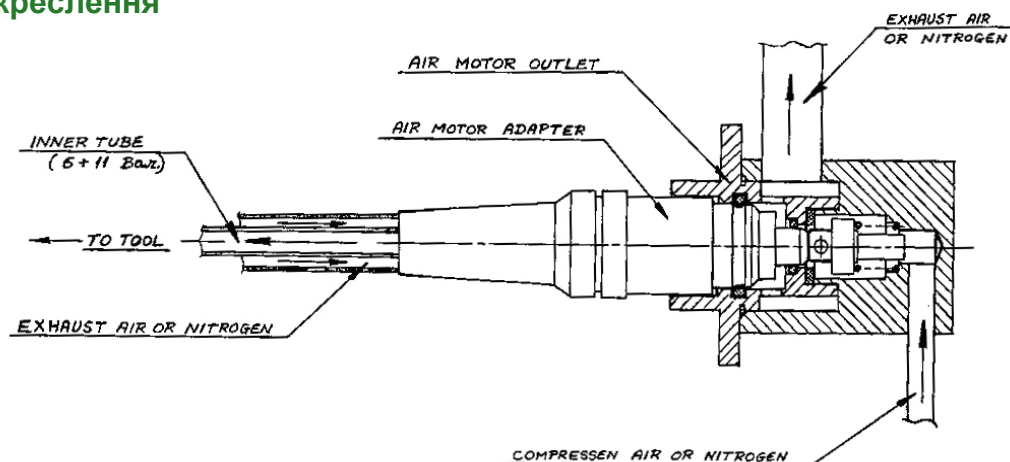

Розміри [мм] Вбудована / Відкрита малюнок

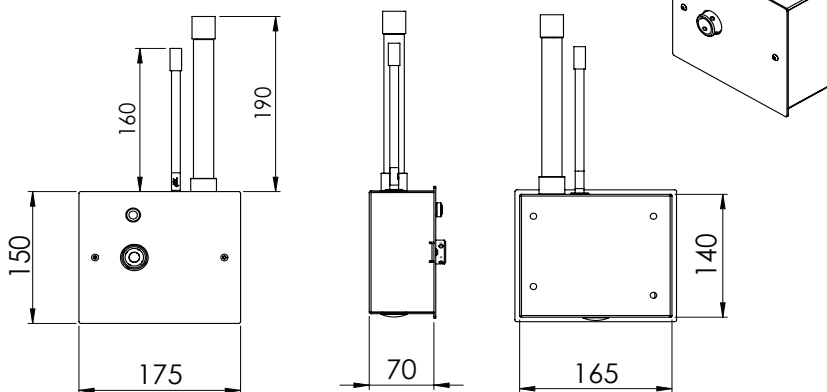

Підвісний монтаж

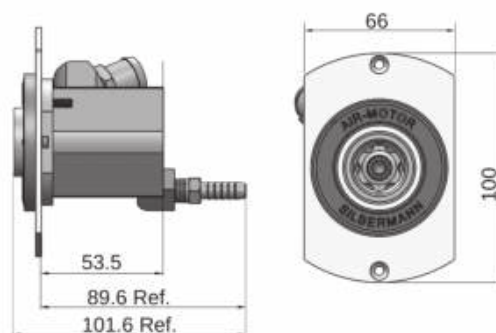

Каталожні номери

Конфігурація розетки	Каталожний номер
Вбудований/накладний монтаж	7190011
Монтаж у підвісній консолі	7190013
Штекер для випускного отвору	2282301

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950