

Розетка системы отвода анестезиологических газов (тип Вентури)

Струйная розетка системы отвода анестезиологических газов Silbermann предназначена для безопасного удаления избыточных анестезиологических газов из операционной.

Узел розетки системы отвода газов использует сжатый воздух для создания разрежения и направляет загрязнённый воздух во внешнюю атмосферу.



Особенности

- Работа на сжатом воздухе - центральная система AGSS не требуется
- При подключении штекера зелёный пневматический индикатор показывает, что система используется
- Очень тихая работа
- Автоматическое отключение при отсоединении штекера
- Регулировка расхода и вакуума
- Быстроразъёмное соединение с механизмом фиксации

Стандарты систем медицинских газопроводов:

- NFPA99
- ISO 7396
- G-01
- HTM 02-01

Система менеджмента качества Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Маркировка CE.






Технические данные


- Давление на входе: 3,5-5 бар
- Расход на входе: 40 л/мин
- Производительность всасывания свободного воздуха: регулируемая, 35-80 л/мин
- Уровень вакуума: регулируемый, 20-50 см H₂O
- Диаметр входной трубки: наружный диаметр 3/8"
- Диаметр отводной трубки: наружный диаметр 7/8"
- Материалы конструкции:
 - Корпус: алюминий с запечённым лакокрасочным покрытием
 - Лицевая панель: анодированный алюминий
 - Инжектор: латунь



Размеры для встроенного/накладного монтажа [мм]

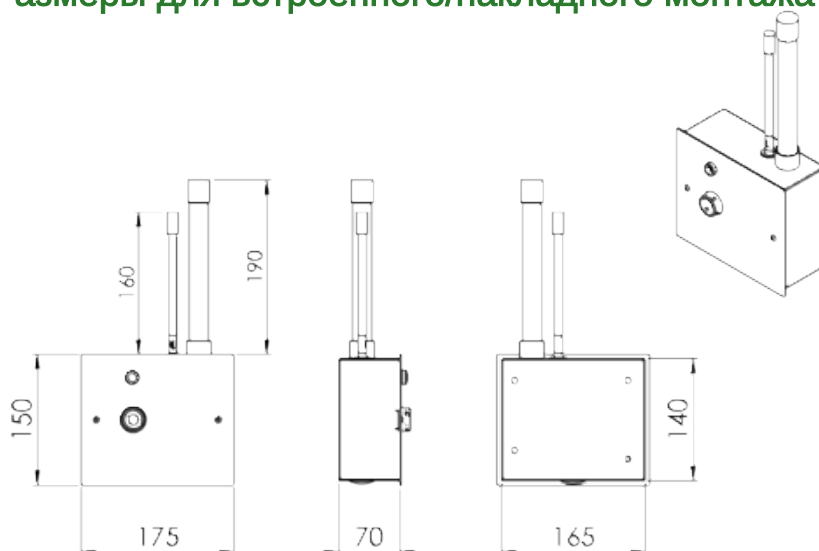

Размеры монтажного выреза для установки на подвесной консоли [мм]

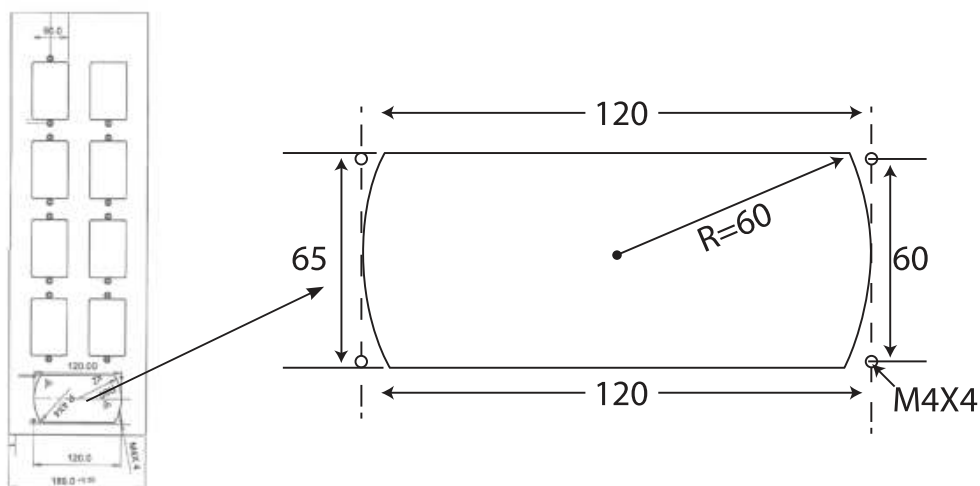



Каталожные номера

Конфигурация розетки	Тип ISO 9170-2	Тип Silbermanн (совместимый с Draeger)
Встроенный/накладной корпус	TBD	3212610
Монтаж на подвесной консоли	TBD	3212512



Сопутствующие изделия

Комплект гибкого шланга для операционной

В комплект шланга длиной 5 метров входят:

- Штекер
- Армированный шланг
- Задний адаптер (для анестезиологического аппарата)

Тип	Каталожный номер
ISO 9170-2	2282200
Silbermanн (совместимый с Draeger)	2282100



Штекер отдельно

Тип	Каталожный номер
ISO 9170-2	2282210
Silbermanн (совместимый с Draeger)	3170000