

Газова розетка CO₂ настінна

Silbermann розробляє і виготовляє медичні газові розетки (термінальні блоки), щоб забезпечити постійний і надійний потік медичного газу для пацієнта і медичного обладнання.

Всі розетки проходять 100% перевірку на пропускну здатність, витоку та очищаються для роботи з вуглекислий газ перед відправкою.

Розетки Silbermann розроблені промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливе і приємну обстановку для пацієнта і медичного персоналу.



Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на витік. Розетки зібрані на заводі, знежирені та очищені для використання з медичними газами.
- Оснащені індексацією для унеможливлення взаємозаміни різних газів.
- Вхідна трубка звертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійне положення, що дозволяє фіксувати штекерний адаптер у розетці.
- Низькі витрати на обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому блоці (запірному клапані).

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу TÜV-SÜD






Технічні характеристики

- Медична газова розетка має бути типу **SILBERMANN DIN**, виготовлена відповідно до стандартів **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка має бути специфічною для конкретного газу завдяки індексації кожної передньої сервісної панелі до штирьового індексованого монтажного блоку для відповідного газу.
- Розетка позитивного та негативного тиску повинна складатися з первинного та вторинного зворотних клапанів для можливості тестування та технічного обслуговування без відключення системи.
- Розетка повинна виготовлятися з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блоку має бути припаяна до корпусу розетки срібним припоєм.
- Після встановлення монтажного блоку розетка повинна регулюватися по глибині для компенсації різної товщини стін.
- Швидкороз'ємна розетка повинна відповідати стандарту ISO 9170-1 і приймати лише відповідний адаптер для конкретного газу за стандартом DIN 13260-2.
- Падіння тиску через розетку становить менше ніж 20 кПа при витраті 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв і тиск 400 кПа (4 бар).



Розміри [мм]

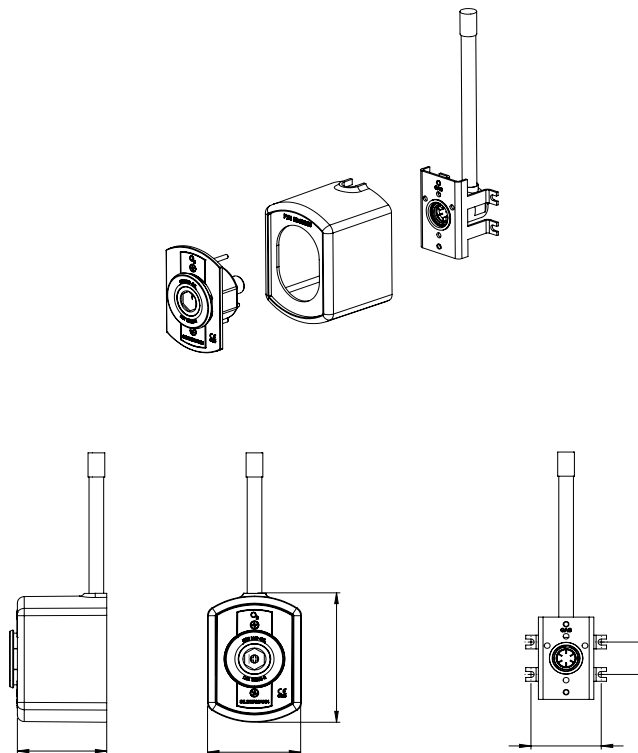


Газова розетка CO₂ для прихованого монтажу

Silbermann розробляє та виготовляє пристрої довговічними, щоб забезпечити постійний та надійний потік медичного газу для пацієнта та медичного обладнання.

Перед відправленням усі розетки проходять 100% тестування на пропускну здатність та герметичність, а також очищаються для роботи з вуглекислим газом.

Розетки Silbermann спроектовані промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливе та приємне середовище для пацієнта та медичного персоналу.

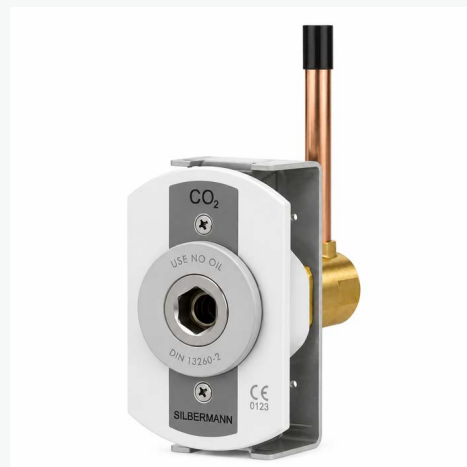

Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на герметичність. Розетки збираються на заводі, знежирюються та очищаються для роботи з медичними газами.
- Мають систему індексації для унеможливлення помилкового підключення іншого газу.
- Вхідна трубка обертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійна позиція, що дозволяє фіксувати штекер адаптера в розетці.
- Низькі вимоги до технічного обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому блоці (запірному клапані).

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу.






Технічні характеристики

- Медична газова розетка має бути типу **SILBERMANN DIN**, виготовлена відповідно до стандартів **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка має бути специфічною для конкретного газу завдяки індексації кожної передньої сервісної панелі до штирьового індексованого монтажного блоку для відповідного газу.
- Розетка позитивного та негативного тиску повинна складатися з первинного та вторинного зворотних клапанів для можливості тестування та технічного обслуговування без відключення системи.
- Розетка повинна виготовлятися з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блоку має бути припаяна до корпусу розетки срібним припоєм.
- Після встановлення монтажного блоку розетка повинна регулюватися по глибині для компенсації різної товщини стін.
- Швидкороз'ємна розетка повинна відповідати стандарту ISO 9170-1 і приймати лише відповідний адаптер для конкретного газу за стандартом DIN 13260-2.
- Падіння тиску через розетку становить менше ніж 20 кПа при витраті 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв і тиск 400 кПа (4 бар).



Розміри [мм]

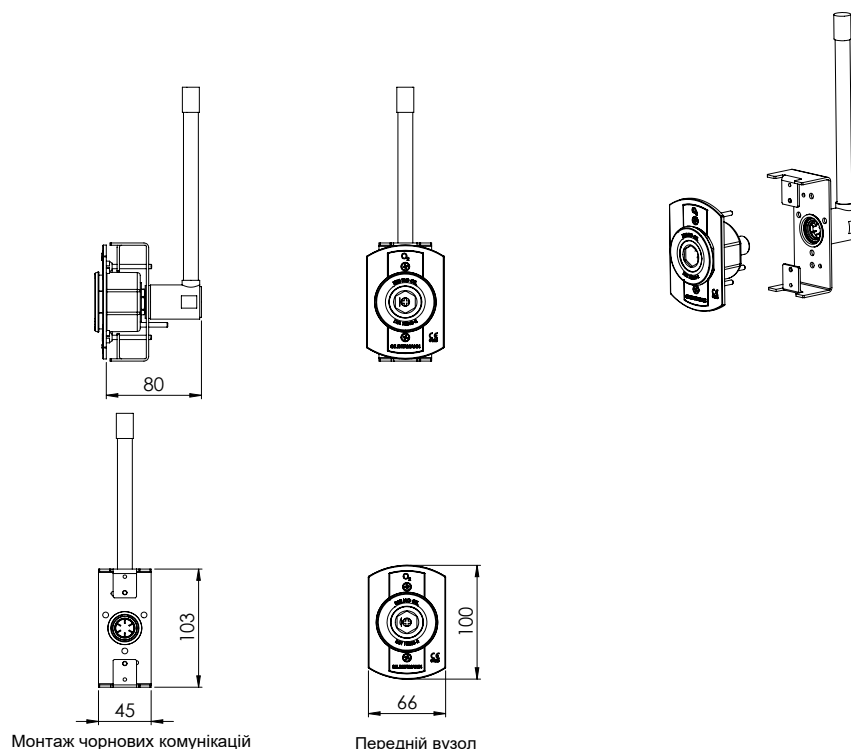

Газова розетка CO₂ для консольного та панельного монтажу

Silbermann розробляє та виготовляє кінцеві пристрої довговічними, щоб забезпечити постійний і надійний потік медичного газу для пацієнта та медичного обладнання.

Усі розетки проходять 100% перевірку на витрату, герметичність та знежирюються під вуглекислий газ перед відправкою.

Розетки Silbermann розроблені промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливий та приємний зовнішній вигляд для пацієнтів і медичного персоналу.



Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на витік. Розетки зібрані на заводі, знежирені та очищені для використання з медичними газами.
- Опційно: доступні розетки для використання в приміщеннях з MPT за запитом клієнта.
- Оснащені кодуванням (індексацією) для унеможливлення взаємозаміни різних газів.
- Вхідна трубка повертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійне положення, що дозволяє «паркувати» штекерний адаптер у розетці.
- Низькі витрати на обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому вузлі (запірному клапані).
- Модульні поодинокі блоки: спроектовані для можливості з'єднання чорнових модулів безпосередньо на об'єкті в будь-якому порядку з кроком 120 мм.

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу TÜV-SÜD





Технічні характеристики

- Розетка медичного газу виготовляється за типом **SILBERMANN DIN** відповідно до **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка є газоспецифічною завдяки індексації кожної передньої панелі обслуговування з відповідним чорновим модулем (rough-in) за допомогою штифтового кодування.
- Розетки позитивного та негативного тиску складаються з первинного та вторинного зворотних клапанів, що дозволяє проводити тестування та обслуговування без відключення лінії.
- Розетка виготовляється з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка чорнового монтажу припаяна сріблом до корпусу розетки.
- З змонтованим чорновим модулем глибина розетки регулюється для компенсації різної товщини стін.
- Розетка швидкого з'єднання відповідає стандарту ISO 9170-1 і приймає тільки відповідні адаптери DIN 13260-2.
- Падіння тиску становить менше ніж 20 кПа через розетку при потоці 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 Бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв та тиск до 400 кПа (4 Бари).



Розміри [мм]

