

## Газовая розетка CO<sub>2</sub> настенная

Silbermann разрабатывает и производит медицинские газовые розетки (терминальные блоки), чтобы обеспечить постоянный и надежный поток медицинского газа для пациента и медицинского оборудования.

Все розетки проходят 100% проверку на пропускную способность, утечки и очищаются для работы с углекислым газом перед отправкой.

Розетки Silbermann разработаны промышленными дизайнерами, чтобы обеспечить привлекательную и приятную обстановку для пациента и медицинского персонала.



## Особенности и преимущества

- Принимает адаптеры для соответствующего типа газа стандарта DIN 13260-2.
- Все розетки проходят 100% гидростатическое испытание на утечку. Розетки собраны на заводе, обезжирены и очищены для использования с медицинскими газами.
- Оснащены индексацией для исключения взаимозаменяемости разных газов.
- Входная трубка вращается на 360° для удобства монтажа.
- Двойное положение, позволяющее фиксировать штекерный адаптер в розетке.
- Низкие расходы на обслуживание благодаря использованию уплотнителей VITON в переднем блоке (запорном клапане).

## Стандарты систем медицинского газоснабжения:

- Соответствует требованиям NFPA 99 и EN ISO 7396-1.

## Применяемые стандарты:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

## Система управления качеством Silbermann:

- Маркировка CE нотифицированного органа TÜV-SÜD.






### Технические характеристики

- Медицинская газовая розетка должна быть типа **SILBERMANN DIN**, изготовленная в соответствии со стандартами **ISO 9170-1** и **DIN 13260-2**.
- Розетка должна быть специфичной для конкретного газа благодаря индексации каждой передней сервисной панели к штыревому индексированному монтажному блоку для соответствующего газа.
- Розетка положительного и отрицательного давления должна состоять из первичного и вторичного обратных клапанов для возможности тестирования и технического обслуживания без отключения системы.
- Розетка должна изготавливаться из медной трубки типа К длиной 175 мм и внешним диаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блока должна быть припаяна к корпусу розетки серебряным припоем.
- После установки монтажного блока розетка должна регулироваться по глубине для компенсации различной толщины стен.
- Быстроразъемная розетка должна соответствовать стандарту ISO 9170-1 и принимать только соответствующий адаптер для конкретного газа по стандарту **DIN 13260-2**.
- Падение давления через розетку составляет менее 20 кПа при расходе 120 л/мин и входном давлении 350 кПа (3,5 бар).
- В полностью открытом состоянии розетка обеспечивает поток до 600 л/мин и давление 400 кПа (4 бар).



### Размеры [мм]

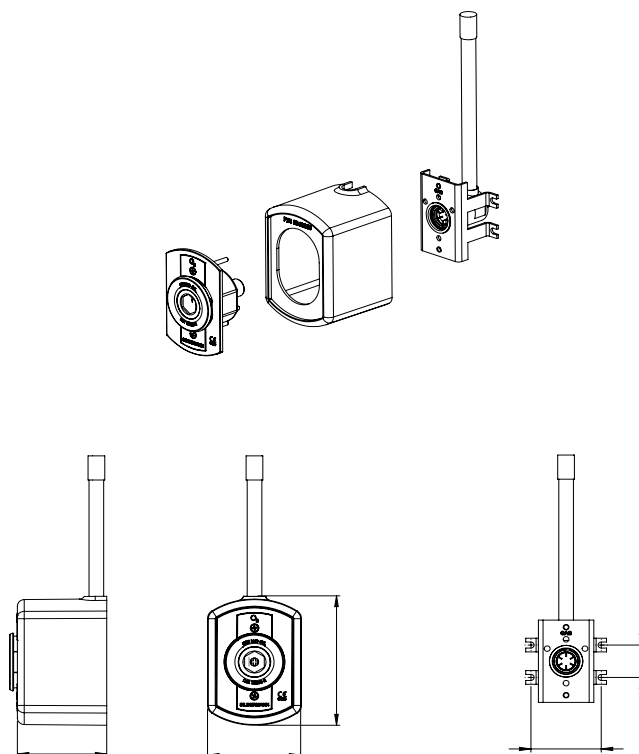

## Газовая розетка CO<sub>2</sub> для скрытого монтажа

Silbermann разрабатывает и производит медицинские газовые розетки (терминальные блоки), чтобы обеспечить постоянный и надежный поток медицинского газа для пациента и медицинского оборудования.

Все розетки проходят 100% проверку на пропускную способность, утечки и очищаются для работы с углекислым газом перед отправкой.

Розетки Silbermann разработаны промышленными дизайнерами, чтобы обеспечить привлекательную и приятную обстановку для пациента и медицинского персонала.



### Особенности и преимущества

- Принимает адаптеры для соответствующего типа газа стандарта **DIN 13260-2**.
- Все розетки проходят 100% гидростатическое испытание на утечку. Розетки собраны на заводе, обезжирены и очищены для использования с медицинскими газами.
- Оснащены индексацией для исключения взаимозаменяемости разных газов.
- Входная трубка вращается на 360° для удобства монтажа.
- Двойное положение, позволяющее фиксировать штекерный адаптер в розетке.
- Низкие расходы на обслуживание благодаря использованию уплотнителей VITON в переднем блоке (запорном клапане).

### Стандарты систем медицинского газоснабжения:

- Соответствует требованиям NFPA 99 и EN ISO 7396-1.

### Применяемые стандарты:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

### Система управления качеством Silbermann:

- Маркировка CE нотифицированного органа TÜV-SÜD.






### Технические характеристики

- Медицинская газовая розетка должна быть типа SILBERMANN DIN, изготовленная в соответствии со стандартами ISO 9170-1 и DIN 13260-2.
- Розетка должна быть специфичной для конкретного газа благодаря индексации каждой передней сервисной панели к штыревому индексированному монтажному блоку для соответствующего газа.
- Розетка положительного и отрицательного давления должна состоять из первичного и вторичного обратных клапанов для возможности тестирования и технического обслуживания без отключения системы.
- Розетка должна изготавливаться из медной трубки типа К длиной 175 мм и внешним диаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блока должна быть припаяна к корпусу розетки серебряным припоем.
- После установки монтажного блока розетка должна регулироваться по глубине для компенсации различной толщины стен.
- Быстроразъемная розетка должна соответствовать стандарту ISO 9170-1 и принимать только соответствующий адаптер для конкретного газа по стандарту DIN 13260-2.
- Падение давления через розетку составляет менее 20 кПа при расходе 120 л/мин и входном давлении 350 кПа (3,5 бар).
- В полностью открытом состоянии розетка обеспечивает поток до 600 л/мин и давление 400 кПа (4 бар).



### Размеры [мм]

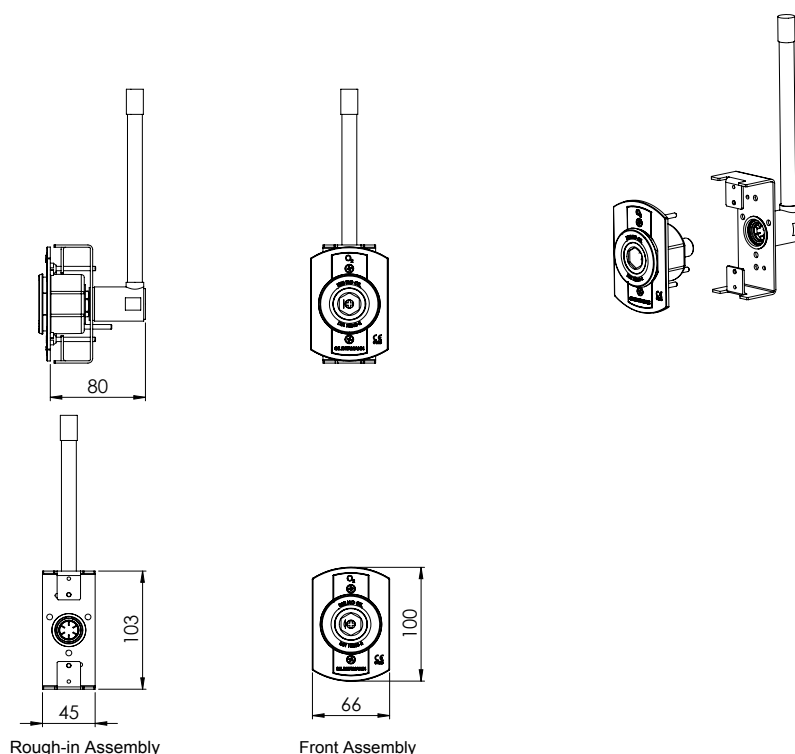

### Газовая розетка CO<sub>2</sub> для консольного и панельного монтажа

Silbermann разрабатывает и производит медицинские газовые розетки (терминальные блоки), чтобы обеспечить постоянный и надежный поток медицинского газа для пациента и медицинского оборудования.

Все розетки проходят 100% проверку на пропускную способность, утечки и очищаются для работы с углекислым газом перед отправкой. Розетки Silbermann разработаны промышленными дизайнерами, чтобы обеспечить привлекательную и приятную обстановку для пациента и медицинского персонала.



### Особенности и преимущества

- Принимает адаптеры для соответствующего типа газа стандарта **DIN 13260-2**.
- Все розетки проходят 100% гидростатическое испытание на утечку. Розетки собраны на заводе, обезжирены и очищены для использования с медицинскими газами.
- Оснащены индексацией для исключения взаимозаменяемости разных газов.
- Входная трубка вращается на 360° для удобства монтажа.
- Двойное положение, позволяющее фиксировать штекерный адаптер в розетке.
- Низкие расходы на обслуживание благодаря использованию уплотнителей VITON в переднем блоке (запорном клапане).

### Стандарты систем медицинского газоснабжения:

- Соответствует требованиям NFPA 99 и EN ISO 7396-1.

### Применяемые стандарты:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

### Система управления качеством Silbermann:

- Маркировка CE нотифицированного органа TÜV-SÜD.





## Технические характеристики

- Медицинская газовая розетка должна быть типа SILBERMANN DIN, изготовленная в соответствии со стандартами ISO 9170-1 и DIN 13260-2.
- Розетка должна быть специфичной для конкретного газа благодаря индексации каждой передней сервисной панели к штыревому индексированному монтажному блоку для соответствующего газа.
- Розетка положительного и отрицательного давления должна состоять из первичного и вторичного обратных клапанов для возможности тестирования и технического обслуживания без отключения системы.
- Розетка должна изготавливаться из медной трубки типа K длиной 175 мм и внешним диаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блока должна быть припаяна к корпусу розетки серебряным припоем.
- После установки монтажного блока розетка должна регулироваться по глубине для компенсации различной толщины стен.
- Быстроразъемная розетка должна соответствовать стандарту ISO 9170-1 и принимать только соответствующий адаптер для конкретного газа по стандарту DIN 13260-2.
- Падение давления через розетку составляет менее 20 кПа при расходе 120 л/мин и входном давлении 350 кПа (3,5 бар).
- В полностью открытом состоянии розетка обеспечивает поток до 600 л/мин и давление 400 кПа (4 бар).



## Размеры [мм]

