

Газова розетка AIR настінна

Silbermann розробляє і виготовляє медичні газові розетки (термінальні блоки), щоб забезпечити постійний і надійний потік медичного газу для пацієнта і медичного обладнання.

Всі розетки проходять 100% перевірку на пропускну здатність, витоку та очищаються для роботи з повітрям перед відправкою.

Розетки Silbermann розроблені промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливе і приємну обстановку для пацієнта і медичного персоналу.



Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на витік. Розетки зібрані на заводі, знежирені та очищені для використання з медичними газами.
- Оснащені індексацією для унеможливлення взаємозаміни різних газів.
- Вхідна трубка звертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійне положення, що дозволяє фіксувати штекерний адаптер у розетці.
- Низькі витрати на обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому блоці (запірному клапані).

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу TÜV-SÜD






Технічні характеристики

- Медична газова розетка має бути типу **SILBERMANN DIN**, виготовлена відповідно до стандартів **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка має бути специфічною для конкретного газу завдяки індексації кожної передньої сервісної панелі до штирьового індексованого монтажного блоку для відповідного газу.
- Розетка позитивного та негативного тиску повинна складатися з первинного та вторинного зворотних клапанів для можливості тестування та технічного обслуговування без відключення системи.
- Розетка повинна виготовлятися з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блоку має бути припаяна до корпусу розетки срібним припоєм.
- Після встановлення монтажного блоку розетка повинна регулюватися по глибині для компенсації різної товщини стін.
- Швидкороз'ємна розетка повинна відповідати стандарту ISO 9170-1 і приймати лише відповідний адаптер для конкретного газу за стандартом DIN 13260-2.
- Падіння тиску через розетку становить менше ніж 20 кПа при витраті 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв і тиск 400 кПа (4 бар).



Розміри [мм]

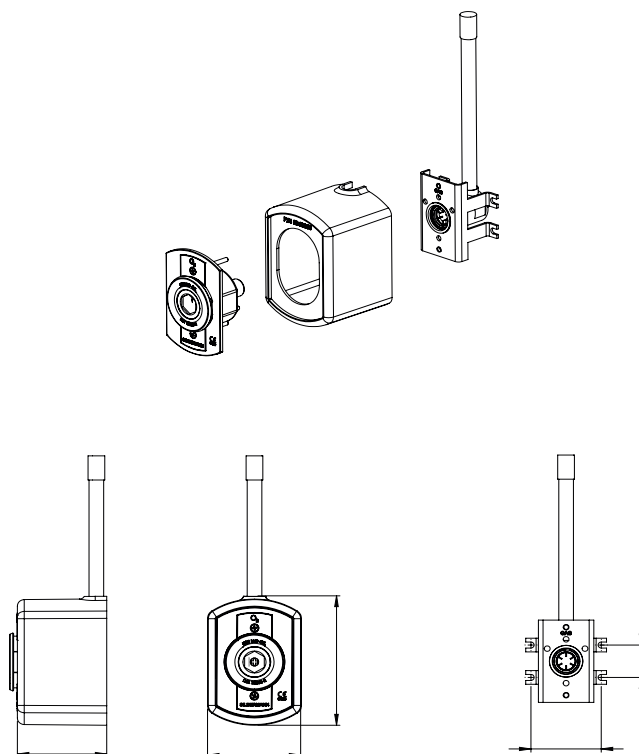


Газова розетка AIR для прихованого монтажу

Silbermann розробляє та виготовляє пристрої довговічними, щоб забезпечити постійний та надійний потік медичного газу для пацієнта та медичного обладнання.

Перед відправленням усі розетки проходять 100% тестування на пропускну здатність та герметичність, а також очищаються для роботи з повітрям.

Розетки Silbermann спроектовані промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливе та приємне середовище для пацієнта та медичного персоналу.

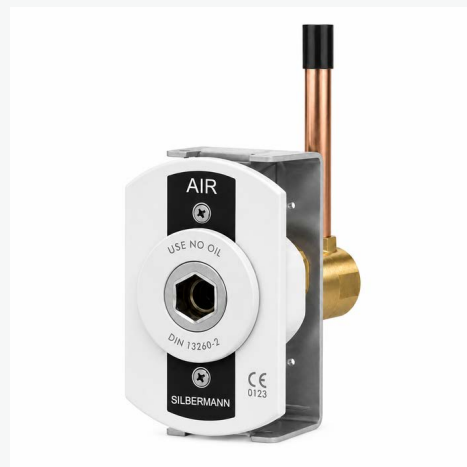

Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на герметичність. Розетки збираються на заводі, знежирюються та очищаються для роботи з медичними газами.
- Мають систему індексації для унеможливлення помилкового підключення іншого газу.
- Вхідна трубка обертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійна позиція, що дозволяє фіксувати штекер адаптера в розетці.
- Низькі вимоги до технічного обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому блоці (запірному клапані).

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу.






Технічні характеристики

- Медична газова розетка має бути типу **SILBERMANN DIN**, виготовлена відповідно до стандартів **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка має бути специфічною для конкретного газу завдяки індексації кожної передньої сервісної панелі до штирьового індексованого монтажного блоку для відповідного газу.
- Розетка позитивного та негативного тиску повинна складатися з первинного та вторинного зворотних клапанів для можливості тестування та технічного обслуговування без відключення системи.
- Розетка повинна виготовлятися з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка монтажного блоку має бути припаяна до корпусу розетки срібним припоєм.
- Після встановлення монтажного блоку розетка повинна регулюватися по глибині для компенсації різної товщини стін.
- Швидкокороз'ємна розетка повинна відповідати стандарту ISO 9170-1 і приймати лише відповідний адаптер для конкретного газу за стандартом DIN 13260-2.
- Падіння тиску через розетку становить менше ніж 20 кПа при витраті 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв і тиск 400 кПа (4 бар).



Розміри [мм]

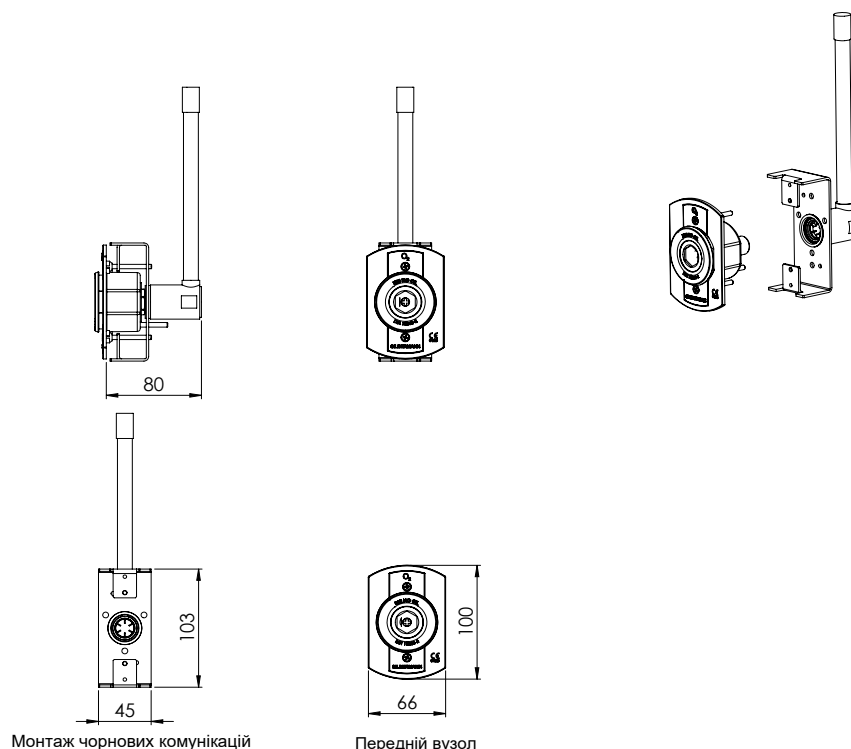

Монтаж чорнових комунікацій

Передній вузол

Газова розетка AIR для консольного та панельного монтажу

Silbermann розробляє і виготовляє медичні газові розетки (термінальні блоки), щоб забезпечити постійний і надійний потік медичного газу для пацієнта і медичного обладнання.

Всі розетки проходять 100% перевірку на пропускну здатність, витіку та очищаються для роботи з повітрям перед відправкою.

Розетки Silbermann розроблені промисловими дизайнерами, щоб забезпечити привабливе і приємну обстановку для пацієнта і медичного персоналу.



Особливості та переваги

- Сумісні зі специфічними для кожного газу адаптерами стандарту **DIN 13260-2**.
- Усі розетки проходять 100% гідростатичне випробування на витік. Розетки зібрані на заводі, знежирені та очищені для використання з медичними газами.
- Опційно: доступні розетки для використання в приміщеннях з MPT за запитом клієнта.
- Оснащені кодуванням (індексацією) для унеможливлення взаємозаміни різних газів.
- Вхідна трубка повертається на 360° для зручності монтажу.
- Подвійне положення, що дозволяє «паркувати» штекерний адаптер у розетці.
- Низькі витрати на обслуговування завдяки використанню ущільнювачів VITON у передньому вузлі (запірному клапані).
- Модульні поодинокі блоки: спроектовані для можливості з'єднання чорнових модулів безпосередньо на об'єкті в будь-якому порядку з кроком 120 мм.

Стандарти систем медичного газопостачання:

- Відповідає вимогам NFPA99 та EN ISO 7396-1.

Застосовні стандарти:

- ISO 9170-1, DIN 13260-2.

Система управління якістю Silbermann:

- Маркування CE від нотифікованого органу TÜV-SÜD





Технічні характеристики

- Розетка медичного газу виготовляється за типом **SILBERMANN DIN** відповідно до **ISO 9170-1** та **DIN 13260-2**.
- Розетка є газоспецифічною завдяки індексації кожної передньої панелі обслуговування з відповідним чорновим модулем (rough-in) за допомогою штифтового кодування.
- Розетки позитивного та негативного тиску складаються з первинного та вторинного зворотних клапанів, що дозволяє проводити тестування та обслуговування без відключення лінії.
- Розетка виготовляється з мідної трубки типу K довжиною 175 мм та зовнішнім діаметром 12,7 мм (1/2"). Трубка чорнового монтажу припаяна сріблом до корпусу розетки.
- З змонтованим чорновим модулем глибина розетки регулюється для компенсації різної товщини стін.
- Розетка швидкого з'єднання відповідає стандарту ISO 9170-1 і приймає тільки відповідні адаптери DIN 13260-2.
- Падіння тиску становить менше ніж 20 кПа через розетку при потоці 120 л/хв та вхідному тиску 350 кПа (3,5 Бар).
- У повністю відкритому стані розетка забезпечує потік до 600 л/хв та тиск до 400 кПа (4 Бари).



Розміри [мм]

