


Розетка системи відведення анестезіологічних газів (тип Вентурі)

Струминна розетка системи відведення анестезіологічних газів Silbermann призначена для безпечного видалення надлишкових анестетичних газів з операційної.

Вузол розетки використовує стиснене повітря для створення розрідження та відведення забрудненого повітря назовні.

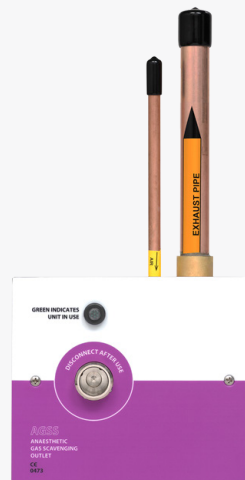

Особливості та переваги

- Робота від стисненого повітря - центральна система AGSS не потрібна.
- Після під'єднання штекера зелений пневматичний індикатор сигналізує про роботу системи.
- Дуже тиха робота.
- Автоматичне вимкнення після від'єднання штекера.
- Регулювання витрати та рівня вакууму.
- Швидкорознімне з'єднання з механізмом фіксації.

Стандарти систем медичних газопроводів:

- NFPA99
- ISO 7396
- G-01
- HTM 02-01

Система управління якістю Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- CE марковано






Технічна специфікація


- Тиск на вході: 3,5-5 бар
- Витрата на вході: 40 л/хв
- Продуктивність всмоктування повітря: регульована, 35-80 л/хв
- Рівень вакууму: регульований, 20-50 см вод. ст.
- Зовнішній діаметр входної трубки: 3/8"
- Зовнішній діаметр відвідної трубки: 7/8"
- Матеріали:
- Корпус: алюміній із запеченим лакофарбовим покриттям
- Лицьова панель: анодований алюміній
- Інжектор: латунь



Розміри для вбудованого/накладного монтажу [мм]

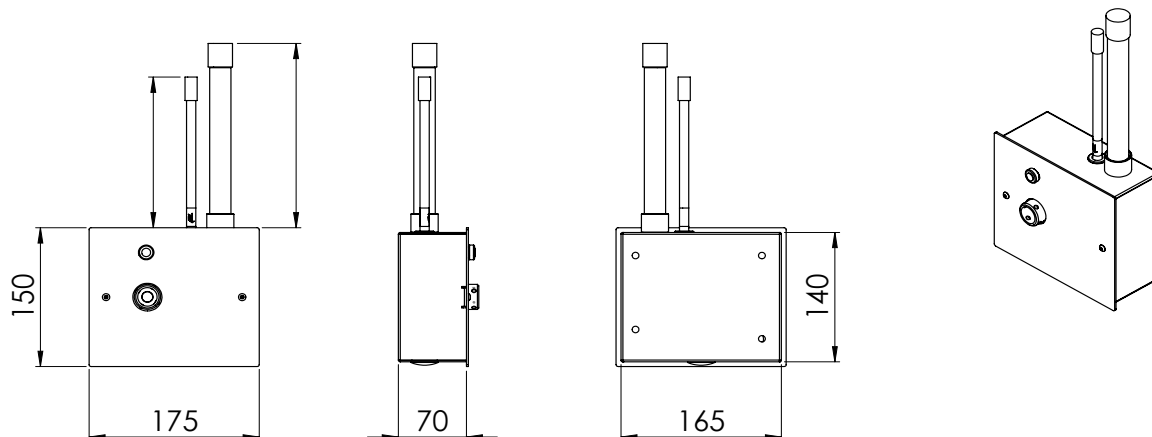

Розміри монтажного вирізу для підвісної консолі [мм]

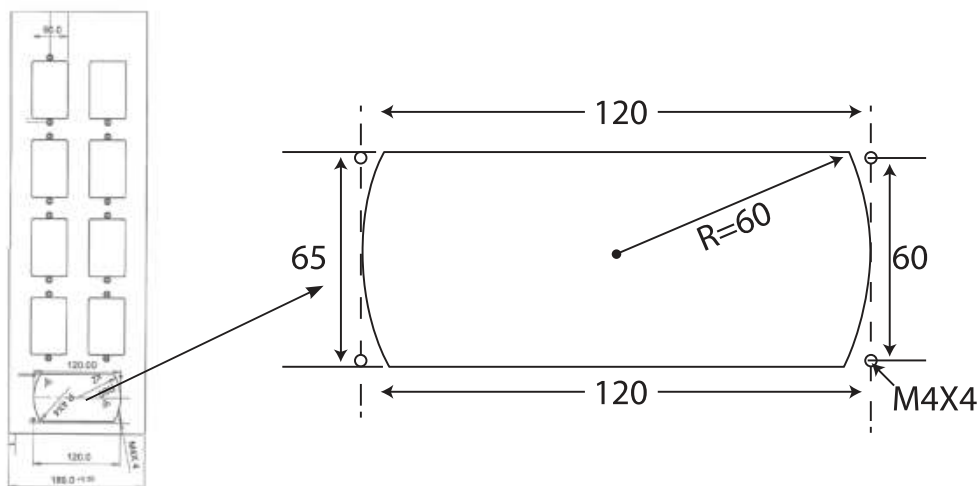



Каталожні номери

Конфігурація розетки	Тип ISO 9170-2	Тип Silbermann (сумісний із Draeger)
Вбудований/накладний монтаж	Уточнюється	3212610
Монтаж у підвісній консолі	Уточнюється	3212512




Супутні товари

Гнучкий шланг в зборі для ОТ

Шланг у зборі довжиною 5 метрів укомплекті:

- Штуцер
- Зміцнений шланг
- Задній адаптер (до анестезійного апарату)

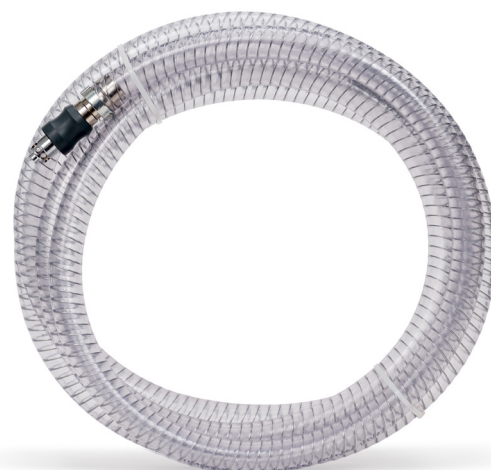

Тип	Каталожний номер
ISO 9170-2	2282200
Silbermann (сумісний із Draeger)	2282100

Окремий штекер

Тип	Каталожний номер
ISO 9170-2	2282210
Silbermann (сумісний із Draeger)	3170000